

24 HORAS MAPA

Monitor de la Presión Arterial



Bravo

24 horas MAPA

... todos los beneficios de la oscilometría.
... toda la experiencia de SunTech relative a la
precisión de mediciones en movimiento.

Monitor Ambulatorio de la Presión Arterial

El Bravo es un instrumento compacto y liviano que ofrece una solución rentable para controlar la presión arterial de su paciente fuera del entorno clínico.

El Bravo emplea la popular técnica oscilométrica de medición de la presión arterial utilizada en monitores cardíacos de hospitales de todo el mundo. La simplicidad de esta técnica permite ajustar el equipo rápidamente al paciente. El Bravo se comunica con la PC a través del software AccuWin Pro de SunTech, para programarlo, así como para la elaboración y edición de informes.

Características y Beneficios

Tecnología Oscilométrica

De rápido ajuste, haciendo que resulte fácil su utilización y permitiendo ahorrar tiempo al operador.

Accesible

Supone recursos limitados de presupuesto.

Reconocimiento del Tamaño del Manguito

El Bravo se ajusta automáticamente a cualquier tamaño de manguito SunTech, reduciendo de esta forma el tiempo de configuración del equipo.

Compacto y Silencioso

Su funcionamiento silencioso y sus pequeñas proporciones ayudan a que el paciente realice el estudio confortablemente.

Bajo Consumo de Potencia

Sólo precisa de dos baterías tipo "AA", lo que permite que su funcionamiento resulte muy económico.

Especificaciones

Técnica:	Oscilometría con desinflado gradual
Precisión:	$\pm 3\text{mmHg}$
Pantalla:	Cristal líquido
Duración de Registro:	Hasta 52 horas
Cantidad de Muestras:	Más de 250 muestras de sistólica, diastólica, PAM y frecuencia cardíaca
Períodos de Muestreo:	3 períodos de tiempo
Botón Start:	Permite al paciente iniciar mediciones fuera del protocolo seleccionado
Fuente de Alimentación:	3 VDC - dos baterías tipo "AA" de 1.5V alcalinas o recargables
Dimensiones:	Aproximadamente 12 cm x 7 cm x 3 cm
Peso:	265 gramos, incluidas las baterías
Interfaz a PC:	Cabo de 3 fios con plug de 1/8 pol
Opciones:	Disponibilidad de varios tamaños de manguitos y versiones en diferentes idiomas

Consulte el manual de operación del Bravo para obtener una descripción, instrucciones y advertencias completas del mismo.

SunTech se reserva el derecho de efectuar cambios en cualquier momento y sin previo aviso.


SunTech Medical
www.SunTechMed.com

SunTech Medical
507 Airport Boulevard, Suite 117
Morrisville, North Carolina 27560-8200 USA
Teléfono: 919-654-2300
Fax: 919-654-2301
E-mail: Sales@SunTechMed.com


SunTech Medical
Oakfield Industrial Estate
Stanton Harcourt Road
Eynsham, Oxfordshire OX29 4TS England
Teléfono: +44 (0)1865 884 234
Fax: +44 (0)1865 884 235

Interfaz a la PC con el AccuWin Pro

- Permite crear un plan de monitorización a medida para cada paciente, con hasta 3 períodos de tiempo específicos.
- Genera informes clínicos concisos. Los informes del AccuWin Pro incluyen el registro de todas las lecturas de presión arterial, frecuencia cardíaca, presión arterial media, carga de presión arterial y una tendencia de los valores de la PA respecto del tiempo. Disponible para Windows™ (versión 3.1 y superiores), Windows™ 95, 98, NT, 2000 y XP.



Estadísticas de interpretación del AccuWin Pro

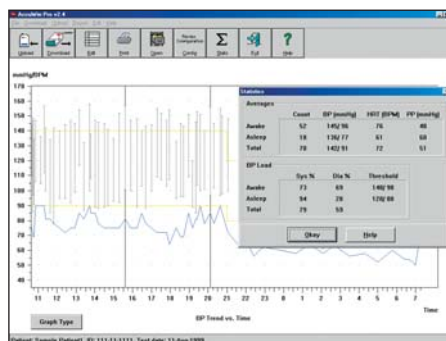

Gráfica de PA frente al tiempo, en el AccuWin Pro

CE
0413